

WRIST

DAY/ NIGHT BRACE SYSTEM

Instructions for use.

Please call (877) 443-3948 with any questions

The aPallo Wrist day/night brace system is the most effective non-invasive treatment for carpal tunnel syndrome. The aPallo system also provides support for wrist injuries (ligament instability, sprain, or muscle strain), post-operative use, and post-removal of cast or splint.

The aPallo Wrist Day/Night Brace System features and benefits:


Day

- Patent Pending - Free palm design allows EASIER (better) gripping functions.
- Properly positions and supports the wrist.
- Cinch-strap™ for quick release for activities.
- Breathable fabric – maximum comfort.
- Protective lycra sleeve
- Easy Application


Night

- Finger-free design provides clinically proven benefit while maintaining the wrist in the optimal sleep position.
- Neutral hand and finger position
- Breathable fabric provides maximum comfort.
- Properly positions and supports the wrist.
- Adjustable to almost any wrist size.
- Treats the condition while you sleep
- Easy Application


Day Wear Instructions

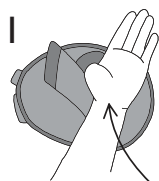

Place thumb in hole with support on the back of the hand.

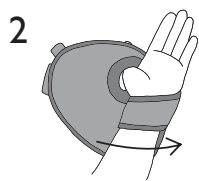


Fold Ice strap across the wrist and attach to the back of the brace.

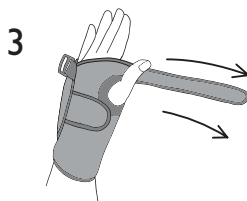

Attach short strap and place long cinch-strap through buckle.




Cinch-strap™ can be tightened or loosened for desired wrist motion.

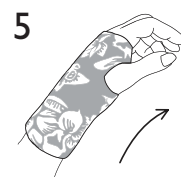


Pull on lycra sleeve and tuck edges under the edge of the brace as shown.


Night Wear Instructions

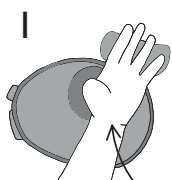

Place brace on firm surface in the starting Position- thumb goes through hole as shown with the metal spar on the back of the hand.

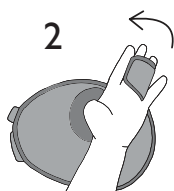

Secure straps over middle and ring finger snugly as shown

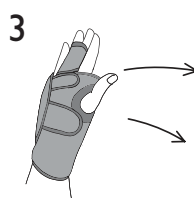

Secure straps as shown.



Washing instructions:
Hand wash only



POIGNET

SYSTÈME D'ATTELLE JOUR/NUIT

Mode d'emploi.

Pour toute question, veuillez appeler le (877) 443-3948

Le système aPallo d'attelle pour poignet jour/nuite est le traitement non invasif le plus efficace pour le syndrome du canal carpien. Le système aPallo fournit également un soutien pour les blessures au poignet (instabilité ligamentaire, entorse ou claquage musculaire), pour l'utilisation post-opératoire et après la suppression de plâtre ou d'une attelle.

Caractéristiques et avantages du système aPallo d'attelle pour poignet jour/nuite :


Jour

- Brevet en instance - La conception paume libre permet des fonctions de préhension plus faciles et plus aisées.
- Positionne le poignet correctement et le soutient.
- Courroie Cinch-strap™ pour une libération rapide pour réaliser des activités.
- Tissu respirant offre un confort maximum.
- Gaine de protection en lycra
- Application facile


Nuit

- Une conception doigts libres fournit des bienfaits cliniquement prouvés, tout en maintenant le poignet dans une position de sommeil optimale.
- Position neutre de la main et des doigts
- Tissu respirant offre un confort maximum.
- Positionne correctement le poignet et le soutient.
- Réglable à presque toute taille de poignet.
- Traite la condition pendant que vous dormez
- Application facile


Instructions pour le port durant le jour

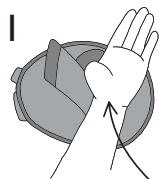

Placez le pouce dans le trou avec le soutien dans le dos de la main.

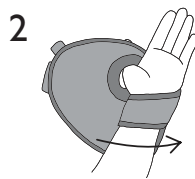


Plier la sangle Ice à travers le poignet et l'attacher à l'arrière de l'attelle.

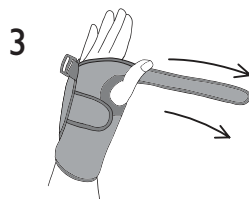

Fixez la sangle courte et passez la courroie à travers les boucles.



La courroie Cinch-strap™ peut être serrée ou desserrée pour permettre le mouvement du poignet désiré.

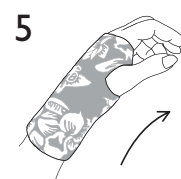


Tirez sur les manches en lycra et insérez les bords sous le bord de l'attelle comme indiqué.


Instructions pour le port durant la nuit



posez l'attelle sur une surface ferme dans la position de départ - le pouce passe par le trou comme indiqué avec le longeron métallique sur le dos de la

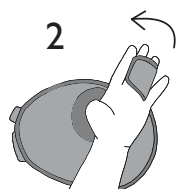

Sécurisez les sangles sur le majeur et l'annulaire jusqu'à qu'elles soient bien ajustées comme illustré.

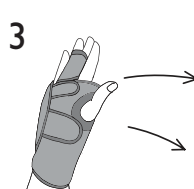

Sécurisez les sangles comme illustré.



Instructions de lavage :
Lavage à la main uniquement

